

***VS4018***

***VENTOSAS MAGNÉTICAS  
DE PLÁSTICO***




## 1. Descripciones generales

Los Kangzhu dispositivos ahuecando serie desarrollados y fabricados por Beijing Kangda Mundial Appliance Centro Médico son los nuevos y excelentes instrumentos de medicina china tradicional y la tecnología moderna. Su funcionamiento es fácil, seguro y confiable, por lo que están muy bien recibido por los clientes.

Terapia de ahuecamiento tradicional china tiene una larga historia, popularmente extendido por todas partes, y es comúnmente llamado "TMC Cupping". Los series de productos de "Kangzhu Ahuecando" están empujados por Kangda centro médico aparato mundo Beijing echado fuera tales desventajas de la terapia de ahuecando antiguo como inconvenientes en la operación, consiguiendo quemar fácilmente, sin seguridad, limitan el tratamiento de los sitios, y el alcance limitado de aplicaciones, y cambiar el aire disipa por el fuego a escape aire por el vacío, permitiendo que el dispositivo de ahuecando aspirado en los puntos de acupuntura de la superficie del cuerpo para causar colaterales locales, eliminan mala humedad, expulsan mala frialdad y eliminan toxinas, curan enfermedades y fortalecen el cuerpo humano.

## 2. Estructura del producto

El producto se compone de las ventosas, pistola de vacío, adaptadores y Gua-Sha.

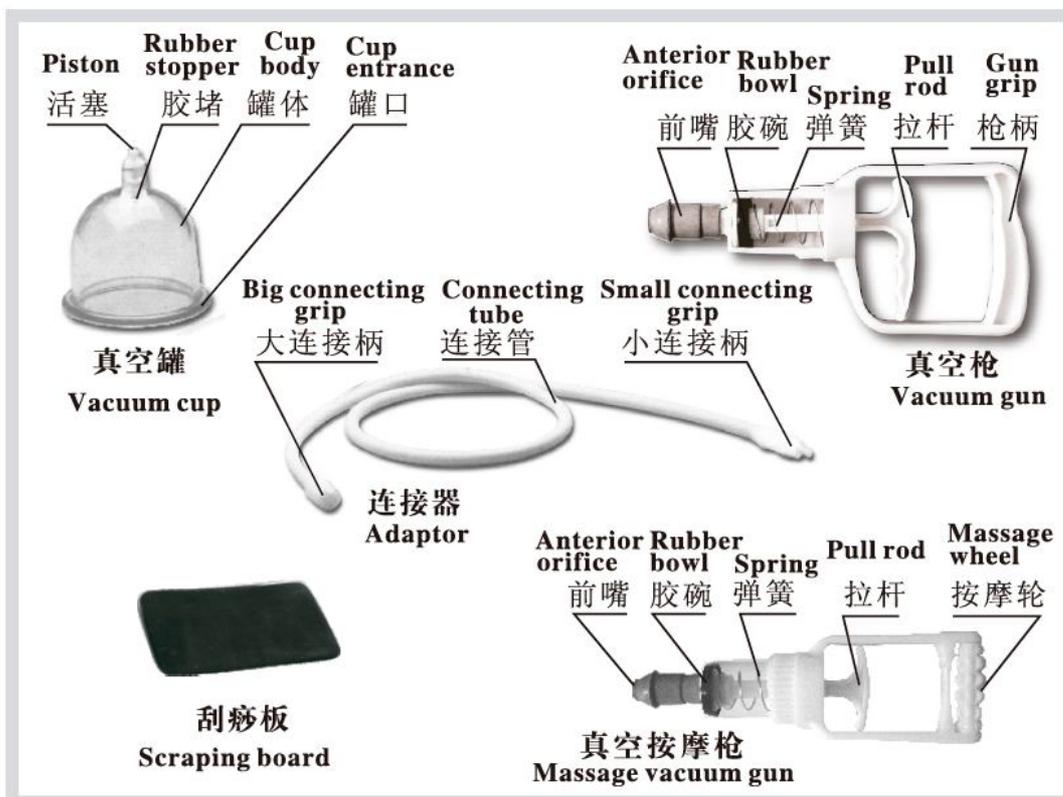

### 3. La contraindicación del producto

Ahucando está absolutamente prohibido para pacientes con enfermedad cardíaca grave, enfermedades hematológicas tales como la hemofilia, leucemia, anemia perniciosa y trombocitopenia.


### 4. Principales indicadores de producto

Los principales técnicos parámetros de producto

Nombre	Artículo	Indicador del parámetro
Pistola de vacío	La estanquidad	El indicador de vacío muestra un valor no inferior a 0.006MPa en una succión curso completo consecutiva por 10 veces
Ventosas	La estanquidad	En condiciones normales, la copa de vacío no estará espontáneamente dejada con la fuga de aire dentro de 20 minutos
	Intensidad	Después de 30 minutos continuos ,la ventosa no se rompe o distorsionado


### 5. Modo de empleo

- A. Seleccione los puntos de acupuntura correctamente de acuerdo a la enfermedad (consulte los puntos de acupuntura tomadas sobre la base de la enfermedad). La selección de los puntos de acupuntura puede explicarse como siguiente:
- El punto Ashi de acupuntura es el punto con el dolor más obvia (no se muestra en ninguna figura de los puntos de acupuntura que se hace referencia tomada en tratamiento)
  - Los puntos de acupuntura que se muestran en las figuras de los puntos de acupuntura que se refiere tomadas: los situados en anteriores y posteriores líneas medianas del tronco del cuerpo humano son puntos de acupuntura individuales. (Ver vaso gobernador y vaso concepción en la Fig. II) Otros puntos de acupuntura están simétricamente dispuestos en pares (sólo un lado se muestra en las figuras), y los puntos de acupuntura en ambos lados se deben tomar en el tratamiento.

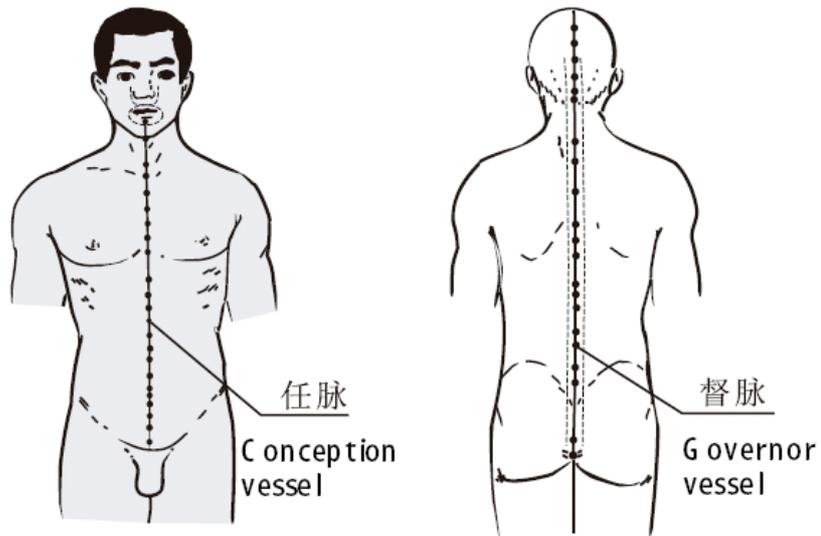

c. Al tomar las acupunturas, los puntos de acupuntura que se hace referencia tomadas en tratamiento pueden ser divididos en dos grupos, y uno se utiliza en días alternos.

B. Seleccione ventosa adecuada y la postura cómoda, generalmente acostado boca abajo, en posición supina, acostado sobre el lado lateral y en varias posturas sentadas, etc.

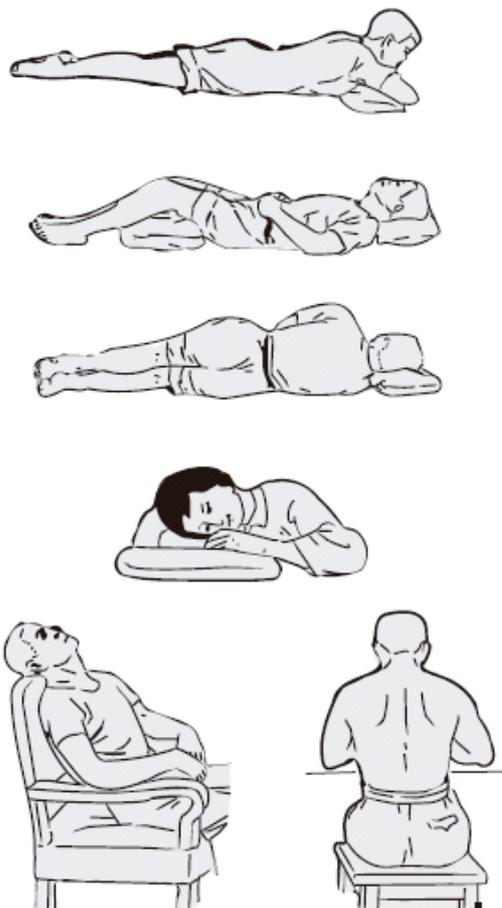


- C. Levantar la posición en la parte superior de vacío (un poco hacia arriba) para asegurarse en el paso libre de aire.
- D. Envolver suavemente la entrada de la pistola de vacío sobre la posición en la parte superior de la ventosa, verticalmente levantar y tirar el tirón montó rápidamente varias veces hasta que se eleva la piel dentro de la copa. La fuerza óptima de succión depende de que el usuario no lo note está bien.
- E. En los sitios que no son accesibles para el propio usuario (tales como las regiones espalda y lumbar), un adaptador (opcional) puede ser utilizado. El método de adaptador de montaje: primero conecta la empuñadura de conexión grande en uno el adaptador a la gran agujero en la entrada pistola de espera, entonces conecta la biela pequeña en el otro extremo a la entrada y el pistón en la parte superior de la copa de vacío están encerrados juntos, y luego las copas de vacío con se colocan en los sitios de tratamiento (véase Fig. IV).



- F. Después de que las copas vacías están absorbidos en la superficie del cuerpo, gire suavemente la entrada de la pistola de vacío a la izquierda ya la derecha y dejarlo posterior. Presione suavemente una vez que el pistón en la ventosa para evitar fugas de aire.
- G. Métodos de copas, se pueden dividir en los siguientes tipos:
  - a. Mantener ventosas: Mantente las ventosas sobre la piel después de ahuecando durante unos 3 minutos. En los pacientes con pieles delicadas, el tiempo es poco variados, por la tolerancia del cuerpo humano. Retire las copas después de la piel por debajo del sitio de excavación está congestionada con extravasación sanguíneos. Si la copa es grande y la fuerza de succión es fuerte, el tiempo de permanencia se puede prolongar ligeramente. En aquellos con enfermedades menos graves, el enfoque más superficial o enfermedades paralizantes, el tiempo de estancia se puede acortar. El tiempo puede prolongarse ligeramente en sitios con músculos más gruesos, y se acortará con músculos delgados; el tiempo de estancia puede prolongarse ligeramente

durante el invierno, y acorta durante el verano. Este es el método más comúnmente utilizado y adecuado para cualquier enfermedad ordinaria.

- b. Ahuecando de diapositivas: también se puede llamar empuje ahuecando. Antes de ventosas, aplicar una capa de Kangzhu raspando aceite (aceite vegetal generalmente) lubricante sobre la piel de los sitios de ventosas o en el orificio de la copa para aspirar las copas. A continuación, tire y empuje las copas vacías un lado a otro a lo largo de los canales a lo largo del circuito deseado de ventosas, y retire las copas antes que la piel de la zona de excavación se enrojece, congestionada o extravasado. Este método puede actuar tanto como ahuecando y raspando los músculos, como la espalda, el lomo y las nalgas, muslos y otras áreas.
  - c. Ahuecando colorada: quite la ventosa después de que succionó, y repetirlo muchas veces hasta que la piel se vuelva de color. Éste método, se utiliza sobre todo en los sitios donde no es muy parejo, y copas serán fáciles dejar, en la cara y otras áreas en las que los restos de cualquier lugar extravasado no son deseables.
- H. Cuando ahuecando se completó, simplemente levante el pistón en el extremo superior del dispositivo de ventosas para que entre aire, y retire las copas.
- I. Curso de tratamiento: 5 días para los niños, los 7 días para los adultos como un curso. Intervalo 3 días y continuar con el próximo curso.

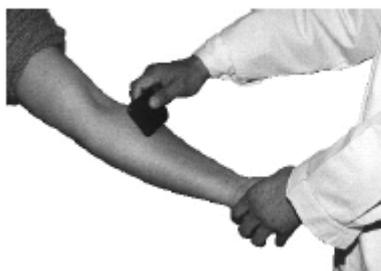

## 6. Mantenimiento y reparación

1. Ventosas de vacío
  - a. Mantenga la ventosa con cuidado de ser aplastada o de caída, y mantenga su limpieza integral.
  - b. El stropper de caucho en la ventosa de vacío (modo B) debe mantenerse segura con el cuerpo de la ventosa, y debe apretarse con herramientas de mano o específicas si hay cualquier cambio hacia abajo o aflojamiento.

- c. Después de su uso, en general, limpie la ventosa con algodón médico, desinfectante y alcohol; y nunca en remojo, hervir en agua o tratarla con alta temperatura.
2. Pistola de vacío
  - a. Antes de utilizar la pistola de vacío, compruebe si el arma se puede sacar automáticamente o no; si no puede ser retirado sin problemas, por favor no tire de él con alta resistencia, con el fin de evitar daños en la barra de tiro de la pistola de vacío.
  - b. Manténela siempre bastante lubricada (vaselina médica, aceite de máquina o aceite comestible son disponibles) entre ventosa de cola de succión y el interior de la pistola, para mantener suave cuando se retira.
3. Generalmente hablando, la pistola de vacío se puede utilizar para 6 meses, después de esto, se debe comprobar, limpiar y mantener una vez.


El método específico : En primer lugar el uso de una mano para sujetar el cañón de la pistola , el pikestaff, widdershins por otra parte ; y luego limpie el interior limpia del cañón de la pistola y la ventosa de goma con un paño o esponja limpia y suave para asegurarse de que no haya suciedad permaneció en el aceite comestible, en la parte interna del cañón de la pistola ; Por fin , unte suficiente (aceite de máquina o aceite comestible , que está bien cuando no se podría gotear automáticamente) lubricante al interior de la pistola y el lado de la taza de goma , y luego montarla.
4. Cuando la salida de aire de la pistola de vacío no es suficiente, reemplace el recipiente de goma, y luego continúe a usarlo después de instalación.

## 7. Precauciones

1. En ahuecando, seleccione la postura general apropiado y las zonas con abundantes músculos y la piel suave y sin vello. Seleccionar diferentes especificaciones de ventosas de vacío de acuerdo con el sitio deseado. Si ventosas tiene que ser tomado en una superficie desigual, coloque un cojín del anillo de goma sobre la entrada de la ventosa para evitar cualquier fuga de aire, o seleccione una taza específica. Si la piel está seca, humedezca la piel primero y luego hacer ahuecando.
2. En el tratamiento inicial, usar primero ventosas pequeñas, y se puede usar menos ventosas y la simulación debe ser suave.
3. Es mejor no cambiar la postura después de que las ventosas están colocadas. En múltiples ventosas, la separación de las copas debe mantenerse a una distancia razonable, y las copas no deben ser arregladas muy de cerca.
4. Usarlo por la primera vez, por favor, tire del pistón a la ligera, evitar que se pegue, evitar la influencia uso normal.

5. Ahuecamiento es inadecuado en las siguientes condiciones:

- a. No es apropiado en áreas alérgicas o ulceradas, y las áreas edematosas.
- b. No es apropiada para las zonas con grandes vasos sanguíneos, los latidos del corazón, los ojos, el ombligo o los ganglios linfáticos aglomerados (incluyendo principalmente sub- mandibular, cervical lateral, supra- clavicular fosa, axilar, inguinal, alergia de piel y otros). (Véase la sig. fig.)

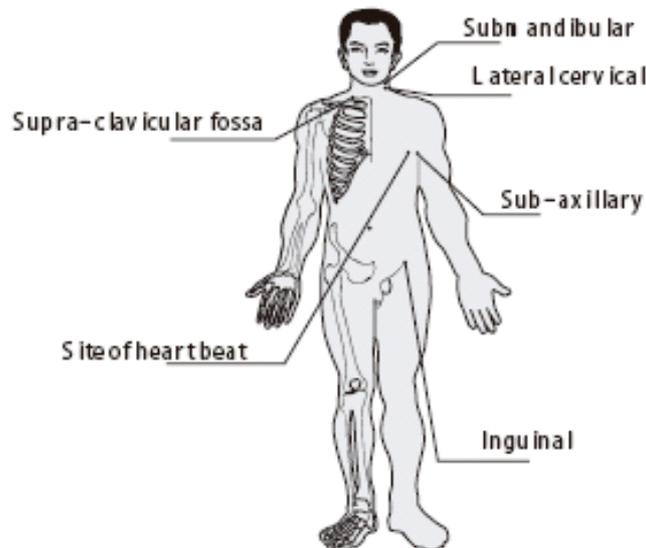

- c. No es adecuado en las zonas con tumor localizado, trauma o fractura, áreas varices de las venas, cicatrices, o escrófula (núcleo de los ganglios linfáticos) y en superficies de los lados sanguíneos.
  - d. No es apropiado sobre los órganos del sentido y zonas pudendas.
  - e. No es adecuado para las mujeres embarazadas, durante la menstruación, pacientes con tuberculosis activa, manía o trastornos mentales, inquietud y calambres musculares o convulsiones.
  - f. No es adecuado para los pacientes con una presión demasiado alta en la sangre, enfermedades del corazón, fallos cardíacos congestivos e insuficiencia respiratoria.
  - g. Usar con precaución en los niños menores de 3 años.
  - h. No es adecuado en ebrio estado, demasiado hambriento, demasiado lleno demasiada sed, después del ejercicio vigoroso, en la paciencia con emaciación extrema, caquexia, y los pacientes sin elasticidad de la piel.
6. Pacientes con enfermedades agudas y críticas, como fiebre alta, coma o convulsiones se debe hacer el diagnóstico definitivo primero, para evitar cualquier pérdida de oportunidades de rescate.

7. Después de retirar las ventosas, no rascar de repente las áreas con enrojecimiento y picazón. Ellos desaparecerán espontáneamente después de varias horas o varios días.
8. Después de ahuecamiento, los fenómenos de la aparición de ampollas en la piel, gotas de agua, puntos sangrado, extravasación de sangre son todas las reacciones terapéuticas normales. El blíster, si es leve, será absorbido de forma espontánea, y así sólo necesita evitar la abrasión y la rotura. Si la ampolla es más grande, que indica las enfermedades más grave, la ampolla puede romperse con una aguja aséptica para descargar el fluido, y luego se aplica una gasa estéril para prevenir la infección.
9. Cuando el paciente está nervioso , hambriento en una mala postura , o la fuerza de succión de ahuecamiento es demasiado grande , al paciente puede a veces aparecer de repente los fenómenos de la pálida complexión , náuseas y vómitos , sudoración profusa y palpitaciones, frialdad de las extremidades , en el fondo y el pulso débil , e incluso pérdida del conocimiento , cianosis en los labios y las uñas , la incontinencia urinaria y fecal , pulso débil e impalpable , y otros. Esto se desmayo en ahuecamiento. Quitar las ventosas de inmediato, permiten al paciente acostarse, y mantenga al paciente caliente. Los casos leves se recuperan después de un descanso por un tiempo, o después de beber un poco de agua o agua azucarada caliente. En los casos graves, si el paciente no se recuperó después del tratamiento anteriormente, otras terapias y maniobras de rescate deben ser consideradas.
10. Después de que ahuecamiento está activado, el paciente debe ser preguntó acerca de sus sentimientos. Sensaciones como el calor, opresión, salida de aire frío, el calor y la comodidad son normales. Si el paciente se sentía demasiado apretado, dolor ardiente, e intolerable, que posiblemente puede ser que la fuerza de succión es demasiado grande o el sitio no es adecuado para el ahuecamiento. Las copas deben entonces ser retirados y colocados de nuevo, o cambiar el sitio de excavación, o se utilizan pequeñas tazas.
11. Mantenga la habitación caliente durante la colocación y extracción de ventosas para evitar corrientes de aire y proteger contra la captura de frío.

## 8. Problemas en uso y su tratamiento

Los problemas relacionados con ventosas y sus medios específicos de tratamientos pueden verse en detalle como la Tabla II

*Problemas en uso y su tratamiento*

Problema	Análisis de las causas	Tratamiento
Dispositivo de ahuecamiento no pasa el aire de ventosas	1) El sello del tapón de goma no está apretado 2) La conexión demasiado apretada de la pistola de vacío con ventosa 3) La conexión de la pistola de vacío y las ventosas no están en vertical	1) Examinar y vuelva a instalar de nuevo. 2) Amarrar suavemente la entrada de la pistola de vacío en la parte superior de las copas de vacío. 3) Mantenga pistola del vacío y de ventosas vertical durante el escape de aire
Fuga gradual después de chupar el dispositivo de ventosas	1) Las sustancias extrañas en el sello del tapón de goma 2) La piel blanda y muy peluda en el sitio de ahuecamiento 3) Grietas en algún lugar de las copas 4) La piel seca	1) Limpie las sustancias extrañas para garantizar la estanqueidad en el sitio de sello de aire 2) Para las detalles, por favor mire Métodos de Uso 3) Reemplazar el dispositivo de ahuecamiento 4) Hidratar la piel con una toalla húmeda
No se puede sacar pistola de vacío	1) Suciedad en el cañón de la pistola 2) La lubricación deficiente	Para las detalles, por favor mire Métodos de Uso

## 9. Garantía del producto.

1. Se garantizan los fallos de producto bajo su uso normal por parte del usuario de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones para reparar un año después de su compra.
2. No están en garantía de reparación las siguientes condiciones:
  - a. Las grietas o daños resultantes de la caída descuidado durante su uso o almacenamiento del producto
  - b. El daño del producto como resultado de fuerzas indebidas.
  - c. Los daños del producto debido a las fuerzas irresistibles externas.
  - d. Con el fin de tener un año de garantía para reparar libremente, el usuario debe mantener la tarjeta de garantía del producto y la factura de la compra.